

Kbiosystems

全自动热封膜仪

英国 Kbiosystems® 成立于1987年，覆盖领域包括汽车、生命科学、生物燃料、动植物科学、诊断自动化和光学镜片制造等，其产品销售到全球各地。Kbio封膜机及热封膜系列产品，专为生命科学、检测分析行业而研发，助力于高效高质量的试剂密封，为样品存储提供完整的解决方案。



Ultraseal Pro

全自动热封膜仪

- 高效密封：6 - 8 块板/分钟
- 密封时间、温度轻松设置
- 兼容不同高度的微孔板
- 适配多种类型的卷膜
- 体积精巧，重量轻
- 选配气封功能，更好地保护样本
- 端口开放，完美整合其他仪器

Ultraseal ePro

全自动电加热封膜仪

- 电加热封膜，无需外置气源
- 减少交叉污染，无噪音
- 自动识别板高度
- 适配多种类型的卷膜
- 触摸屏操作，程序可储存
- 选配气封功能，更好的保护样本
- 密封过程受监测，确保均匀密封
- 自动感应装膜，无需额外工具
- 单机运行，易于整合







应用领域

■ 高通量药筛 ■ 化合物存储 ■ PCR/qPCR/rtPCR ■ 测序 ■ 细胞/菌种培养 ■ 种子/昆虫存储

适用膜类型

- 可撕透明膜
- 不可撕透明膜
- 透明可穿刺膜
- 透明型粘膜
- 透气膜
- 超耐低温透气膜
- 高渗透气膜
- 快速密封PCR膜
- 可撕铝膜
- 可穿刺铝膜
- 耐DMSO铝膜
- 适用于PS材质的可撕铝膜
- 可穿刺耐DMSO膜
- 升级可揭铝膜
- 升级可穿刺铝膜
- ...

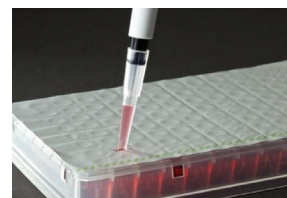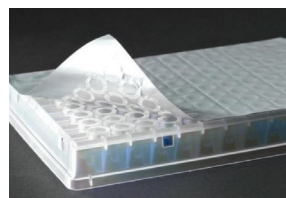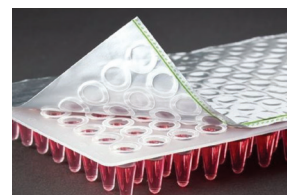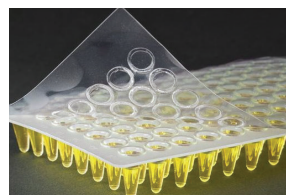

技术参数	Ultraseal Pro 全自动热封膜仪	ultraseal ePro 全自动电加热封膜仪
封板速度	6 ~ 8 块板/分钟	3 ~ 4 块板/分钟
兼容板高度	7 ~ 48 mm	7 ~ 48 mm
气封功能	可选	可选
封膜宽度	78 mm	78 mm (选配 82 mm)
封膜长度	约 127 mm	118 ~ 128 mm (软件可更改)
封膜温度	室温 ~ 199°C	室温 ~ 199°C
封膜原理	气动, 5.5 ~ 6.5 bar, 50 L/min	电动加热
通讯端口	RS 232, 3m	RS 232, 3m
尺寸 (D×W×H)	630 × 192 × 435 mm	845 × 234 × 530 mm
重量	12 kg	25 kg
电压	110 ~ 220 VAC	110 ~ 220 VAC

